




## Commande d'un gsm

# GSM Gewa

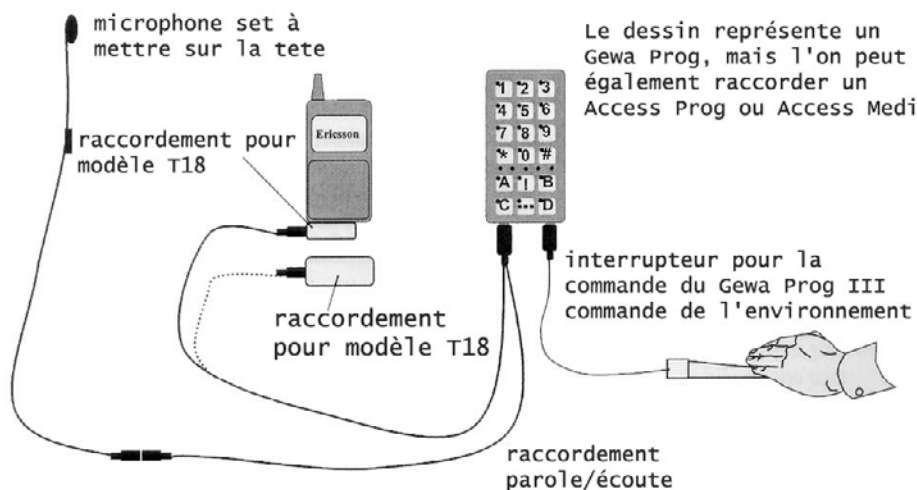

A l'aide du GEWA Prog III, l'Access Gewa Prog ou le clavier Access Medi GEWA, il est possible de choisir des numéros de téléphone préprogrammés, de répondre aux appels de l'extérieur et de clôturer ces appels.

La reconnaissance de voix du gsm Ericsson peut être commandée grâce à un petit set à placer sur la tête et un interrupteur 1 fonction de l'unité de commande de l'environnement.

Ce set fonctionne avec la reconnaissance de voix intégrée gsm Ericsson, modèles : T18, T28, R310, R320, A2618, T20.

Le problème avec un gsm standard avec reconnaissance de voix, est qu'il faut appuyer sur une touche avant de prononcer le nom; ce qui n'est pas possible pour tous le monde. Etant donné que l'émetteur Gewa Prog peut être commandé main-libre (au moyen d'un interrupteur simple), il n'est plus nécessaire d'appuyer sur cette touche du GSM. L'on peut téléphoner à tous les numéros de téléphone qui sont préprogrammés dans la mémoire et qui peuvent être appelés par la voix (généralement 10 n°)